

Tillegg til ZOLL® AED Plus® Veiledning for administrator



Viktig: Dette symbolet indikerer at AED Plus-enheten er utstyrt for å behandle både voksne og barn. En AED Plus-enhet uten dette symbolet er ikke utstyrt for å behandle barn, og *vil ikke fungere sammen med Pedi-padz® II* -barneelektroder. Hvis du vil oppgradere en AED Plus-enheten for bruk sammen med ZOLL Pedi-padz II-barneelektroder, kan du kontakte ZOLL Medical Corporation eller en autorisert ZOLL-distributør for informasjon vedrørende ZOLL AED Plus oppgraderingssett for barn.

Hvis en AED Plus-enhet er utstyrt for å behandle voksne og barn, og du kobler til en elektrodekabel for voksne pasienter, vil AED Plus-enheten automatisk gå inn i voksenmodus for registrering av kardiorytme og automatisk valg av sjokkenergi (120 joule, 150 joule, 200 joule), vise skjermledeteksten **ELEKTRODER VOKSEN** og pipe tre ganger. Når du kobler til kabelen som hører til ZOLL Pedi-padz II-barneelektroder, vil AED Plus-enheten automatisk gå inn i barnemodus for registrering av kardiorytme og automatisk valg av sjokkenergi (50 joule, 70 joule, 85 joule), vise skjermledeteksten **ELEKTRODER BARN** og pipe tre ganger.

Feste Pedi-padz II (spedbarns-/barne-)elektroder


Klargjør pasienten før du fester Pedi-padz II-elektroden.

Slik klargjør du pasienten:

1. Fjern all bekledning som dekker pasientens brystkasse.
2. Sørg for at pasientens brystkasse er tørr.

Slik fester du **Pedi-padz II**-elektroden:

1. Riv opp elektrodepakken og brett ut den innerste pakken slik at elektrodene vises. Plasser elektrodene på pasienten i henhold til bildene på elektrodepakken.
2. Fjern beskyttelsen fra baksiden av den runde elektroden og plasser elektroden på pasientens bryst (som vist på bildet på elektrodepakken).
3. Plasser hånden på kanten av elektroden og bruk den andre hånden til å rulle elektroden forsiktig på pasientens bryst. Trykk eventuell luft ut fra under elektroden etter hvert.
4. Snu pasienten på brystet, fjern beskyttelsen fra baksiden av den kvadratiske elektroden og plasser elektroden på pasientens rygg (som vist på bildet på elektrodepakken).
5. Plasser hånden på kanten av elektroden og bruk den andre hånden til å rulle elektroden forsiktig på pasientens bryst. Trykk eventuell luft ut fra under elektroden etter hvert.
6. Snu pasienten på ryggen og følg ZOLL AED Plus-ledeteksten.

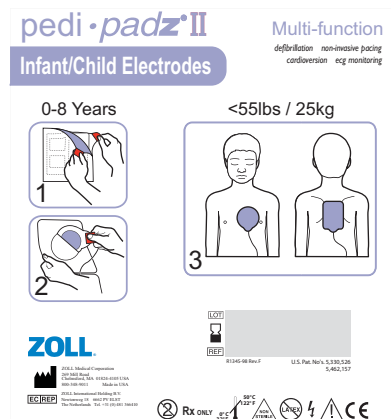

MERK Du kan også bruke Pedi-padz II (spedbarns-/barneelektroder) sammen med ZOLL-hjertestimulatorprodukter i inntil én time med stimulering (mer informasjon om stimulering finner du i *M Series Operatørveiledning*).

Indikasjoner for bruk

Bruk ZOLL AED Plus når en person med antatt hjertestans har en åpenbar Sirkulasjonssvikt indikert av:

- Bevisstløshet og
- Manglende normal pusting og
- Manglende puls eller tegn på sirkulasjon.

Når en pasient er yngre enn 8 år og veier mindre enn 25 kg (55 lbs), skal ZOLL AED Plus brukes sammen med ZOLL AED Plus-barneelektroder. Behandlingen skal ikke utsettes for å finne pasientens nøyaktige alder og vekt.