

Aivia200

A-MIP 200 Installasjons- og brukerveiledning



Generelle opplysninger

Viktig

Les denne brukerveiledningen før installasjon og bruk av Aivia. Les nøye dette avsnittet og følg instruksjonene. Garantien gjelder ikke skader som er forårsaket av manglende overholdelse av instruksjoner

Aivia PROTECTION er veggoppbevaringer som kan romme og beskytte automatiske eksterne defibrillatorer (AED). Aivia PROTECTION sikrer ikke kontrollen av AED, DISTRIBUTØREN bør på eget ansvar, og holde sine egne UNDERLEVERANDØRER og BRUKERE informert om deres forpliktelser til å verifisere tilstanden til AED og dens tilstedeværelse ved å utføre regelmessige kontroller på stedet. Avhengig av hvilke ekstraustyr som er valgt, vil Aivia PROTECTION utløse lokale visuelle- og lydalarmer. Alarmen er en engangsinformasjon som bare er aktiv under uregelmessigheten, ingen historikk over uregelmessigheter lagres. I ingen tilfeller kan funksjonsstatus og tilstedeværelsen til AED som er plassert i Aivia PROTECTION fjernkontrolleres. Aivia kan aldri erstatte kontroller og verifikasjoner som kreves av defibrillatorens produsent.

Installasjonen må utføres av en kvalifisert tekniker eller som er godkjent av Aivias produsent

Installer aldri Aivia så den er direkte eksponert for sol. Aivia uten oppvarming må installeres i tempererte omgivelser, i samsvar med krav fra defibrillatorens produsent. Aivia med oppvarming må installeres i omgivelser som respekterer Aivias driftstemperaturer. Du må sørge for en oppfølging av varsler som er knyttet til temperatur.

Aivias egenskaper kan endres uten varsel.

Aivias produsent forbeholder seg retten til å endre produktene til enhver tid, uten begrensninger for modifikasjon av produkter som er levert tidligere.

Varemerket AIVIA er et registrert varemerke.

Sikkerhet

For å unngå all brannrisiko eller elektrisk støt, må ingen flamme plasseres i nærheten av Aivia.

La det være et åpent område på minst 13 cm rundt hele Aivia for å sikre god ventilasjon.

Hold Aivia unna varmeovner eller alle andre varmekilder. Pass på å ikke plassere Aivia over annet utstyr som kan varme. Pass på å ikke plassere noe under Aivia.

For å unngå all skade, ikke plasser gjenstander inn i åpningene.

Installer aldri Aivia så den er direkte eksponert for sol.

Ikke utsett Aivia for vann når døren er åpen.

Festeanordningen må være tilpasset til den type underlag som Aivia er festet. Produsenten kan i ingen tilfeller holdes ansvarlig for utilstrekkelig festing eller ulykke eller skade i løpet av festingen.

Garanti

Ikke demonter elementene som utgjør Aivia. Ikke plasser gjenstander inn i åpningene.

Kun godkjent personell er autorisert til å utføre reparasjoner på Aivia.

Unnlatelse av å respektere dette vil oppheve alle garantier, uttrykkelig eller stilltiende.

Enhver bruk som er uttrykkelig forbudt eller enhver monteringsprosedyre som ikke er anbefalt av denne veiledningen vil oppheve garantien.

Miljøinformasjon

I tilfelle retur av Aivia, skal det brukes den komplette originalemballasjen.

Ikke kast Aivia og dens emballasje sammen med husholdningsavfall. Bruk innsamlingssystemet og miljøstasjonen som er på plass i regionen din. Bruk av innsamlingssystemer og miljøstasjon bidrar til å bevare helse og miljø. Aivia kan inneholde batterier i samsvar med europeiske direktiver 2006/66/EF og 2008/103/EF. Disse kan ikke kastes sammen med vanlig sammen med husholdningsavfall. Vennligst skaff informasjon om innsamlingssystemet for brukte batterier som er på plass i regionen din. Korrekt avfallshåndtering av brukte batterier bidrar til å bevare helse og miljø.



Vedlikehold

NB

AIVIA INNEHOLDER BATTERIER. DET ER EN EKSPLOSJONSFARE DERSOM BATTERIENE I AIVIA SKIFTES UT MED BATTERIER AV FEIL TYPE.

KUN EN GODKJENT TEKNIKER ER AUTORISERT TIL Å UTFØRE VEDLIKEHOLDSDOPERASJONER, INKLUDERT Å SKIFTE UT BATTERIENE.

Innhold

Installasjon

Viktig	4
Presentasjon av Aivia	4
Identifikasjonsmerke	4
Første åpning	4
Festing av Aivia	5
Koble strømforsyning til Aivia	6
Montering av defibrillatoren	7
Installasjon av forseglinger	7
Piktogrammer	7

Bruk

Funksjonen til nattmodus	8
Funksjonen til ekstrautstyret oppvarming	8
Funksjonen til varsler	8
Bruk av Aivia	8
Etter bruk av defibrillatoren	8
Vedlikehold av Aivia	8

Feilsøking

9

Elektrisk installasjon

10

Spesifikasjoner

Mekaniske data	11
Tekniske data	11
Overensstemmelser	11



Installasjon

Viktig

Les hele denne brukerveiledningen nøye før installasjon og bruk av Aivia.


Installer aldri Aivia så den er direkte eksponert for sol. Du risikerer å utsette defibrillatoren for høye temperaturer.

Présentation de l'Aivia

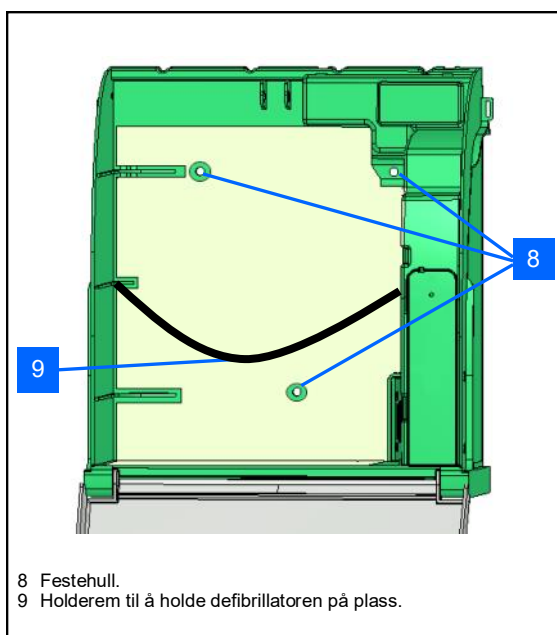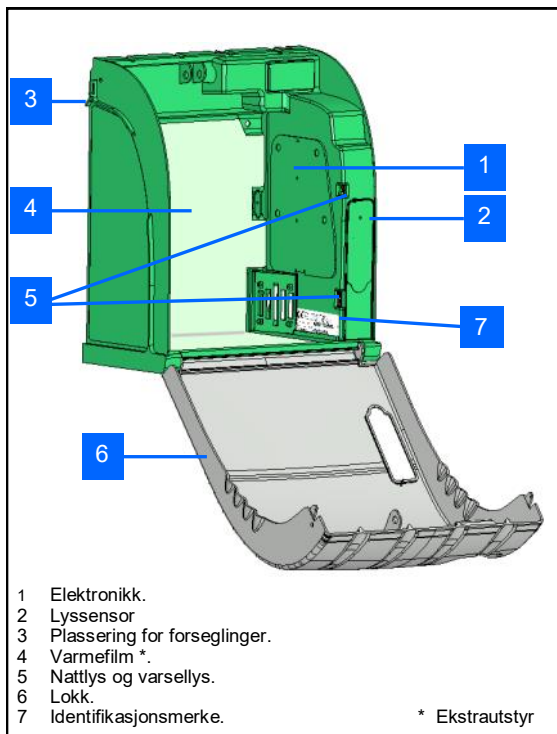

Identifikasjonsmerke


Identifikasjonsmerket er limt på innsiden av Aivia.

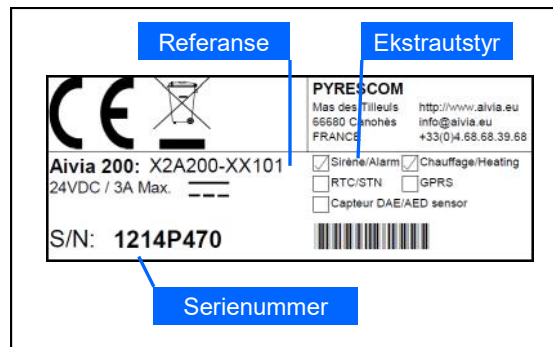

• For all korrespondanse med kundeservice eller deres samarbeidspartner, utstyr deg med Aivias referansenummer og serienummer.

Første åpning

- For å åpne døren til Aivia før den er installert på veggen, bruk en tynn skrutrekker.
- Skyv skrutrekkeren mellom Aivias dør og kabinett.
- Ta ut skrutrekkeren, og pass på å ikke lag merker på elementene.

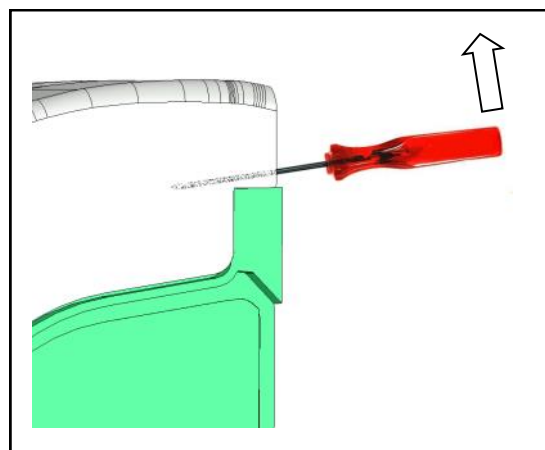


- Gjør dette på begge sider av Aivia.

Installasjon


Festing av Aivia

Installer aldri Aivia så den er direkte eksponert for sol. Du risikerer å utsette defibrillatoren for høye temperaturer.


- Installasjonen må utføres av en kvalifisert tekniker eller som er godkjent av Aivias produsent og skal overholde Bornavie-charteret.
- Hvis Aivia installeres på offentlig sted eller på et gjennomgangsted, skal det være et gulvareal (hevet beleg) eller en søyle for å overholde forordning fra 15. januar 2007 "Tekniske forskrifter for det offentlige veinettets tilgjengelighet" §6-D.
- Festeanordningen må være tilpasset til den type underlag som Aivia er festet.
- La arbeidsområdet for oppsettet av Aivia være fritt som angitt i skjemaene under.
- De nøyaktige mål for Aivia finnes ved slutten av dette dokument i avsnittet Spesifikasjoner.
- Sørg for alle de nødvendige kabler er ført gjennom kabelføringen før Aivia festes.

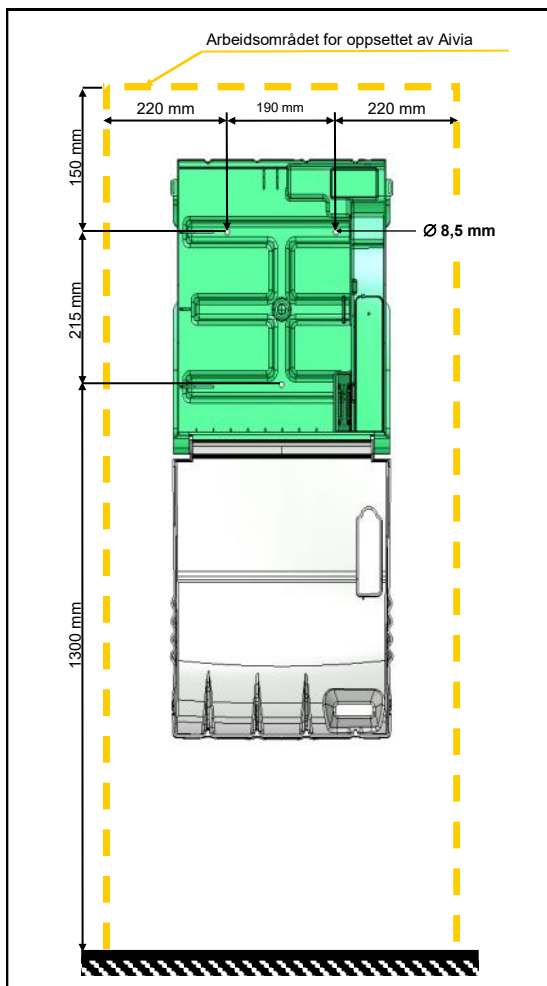


- La det være et ledig område på 140 cm fra Aivias veggstøtte, så det er lett å åpne lokket.

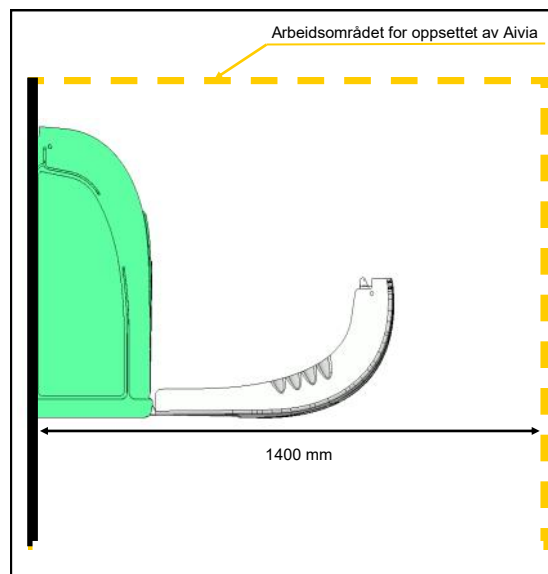

- Bruk hullmalen som er levert sammen med emballasjen til å avmerke festehullene og strømledningens innføring på veggen.

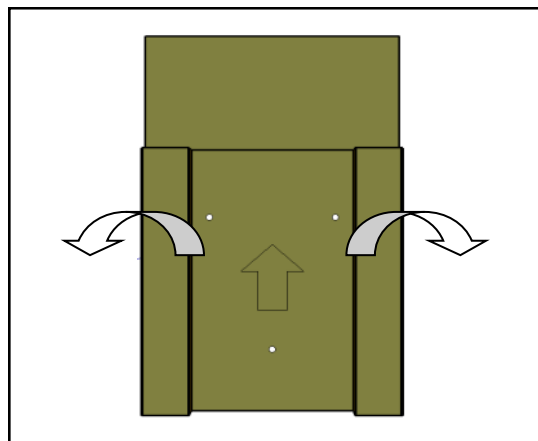


- Plasser hullmalen på veggen med pilen mot deg og oppover.

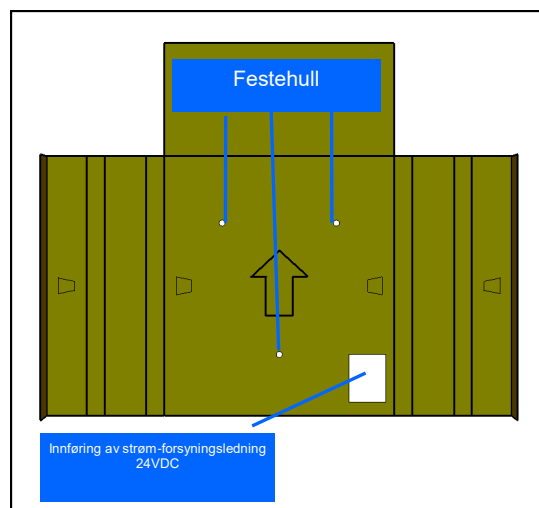

Installasjon

- Bruke et festesett som er tilpasset til den type underlag som Aivia er festet.
- Festet skal kunne støtte en minimumsbelastning på 20 kg
- Eksempel på festing:

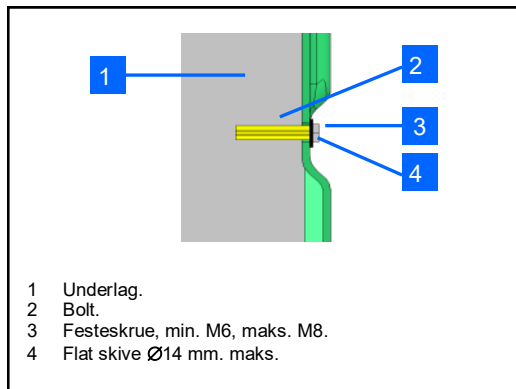


- Skive- og skruhodet må sammen være maks. 8 mm tykke.


Fest Aivia med de tre festehullene.

Koble strømforsyning til Aivia


- Aivia skal strømforsynes med 24 V DC, respekter instruksjonene i avsnittet "Elektrisk installasjon"

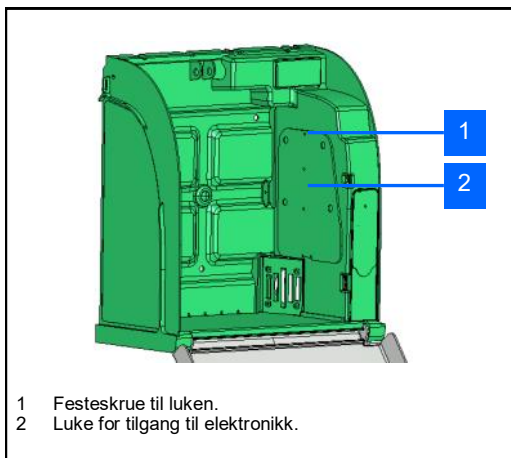


- Skru av lukens festeskruer med en stjerneskrutrekker, og vipp lukken oppover.

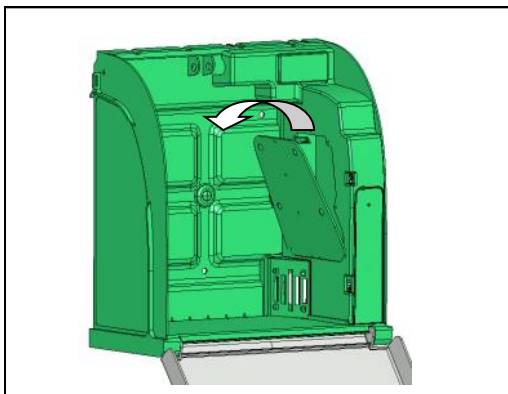


- Før strømkablene inn i kabelføringen

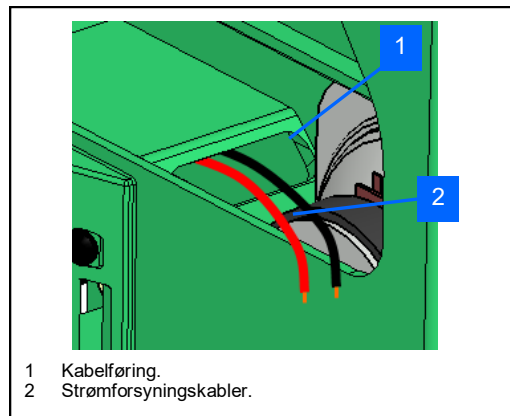


- Koble kablene til strømforsyningsterminalen og respekter polariteten.

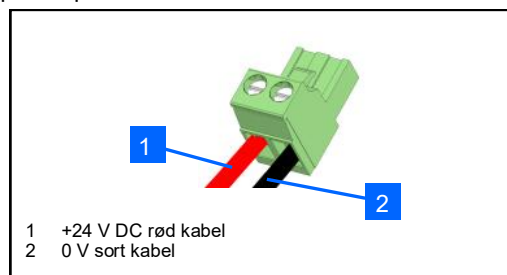

- Koble terminalen til strømforsyningskoblingen.

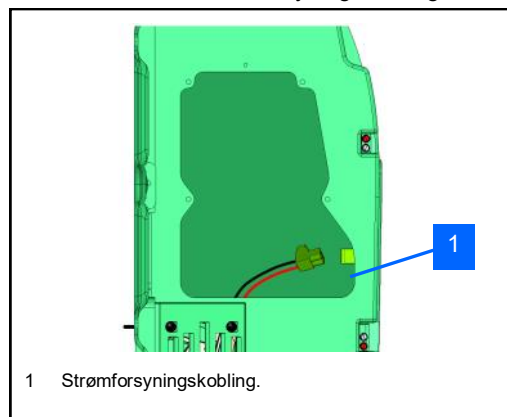

- Kontroller at Aivia er koblet til strømforsyning ved å kontrollere at de røde varselampene blinker.

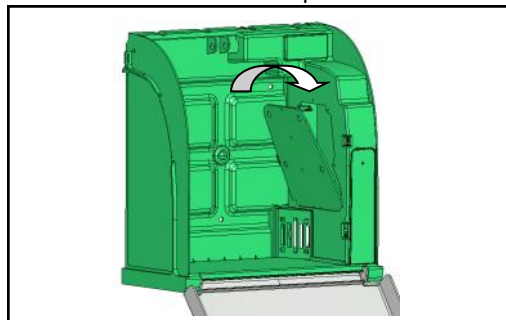


- Sett på plass lukken ved å sette inn den nedre delen.
- Skru på lukens festeskruer med en stjerneskrutrekker.

Installasjon

Montering av defibrillatoren

- Dra i holderremmen til å holde defibrillatoren på plass, og skyv defibrillatoren helt inn til Aivias bakplate.

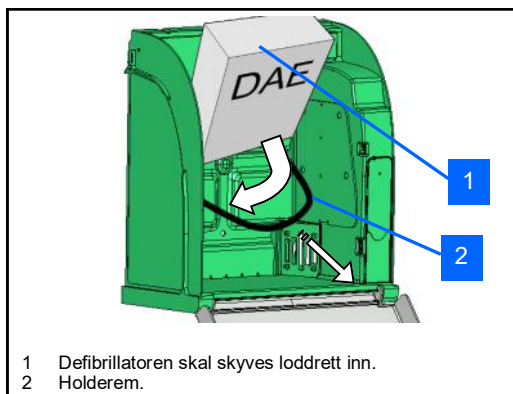


- Holderemmen gjør det mulig å enkelt trekke ut defibrillatoren i en nødssituasjon, samtidig som den sikrer at defibrillatoren sitter godt fast. .

Installasjon av forseglinger


- Aivia leveres med to sett med forseglinger.
- Forseglingene viser om lokket har vært åpnet.
- Kontroller regelmessig forseglingenes tilstand.

Påsetting av forseglinger


- Lukk Aivias lokk helt igjen. Sørg for at du har trukket lokkets nedre del helt til deg før du vipper lokket

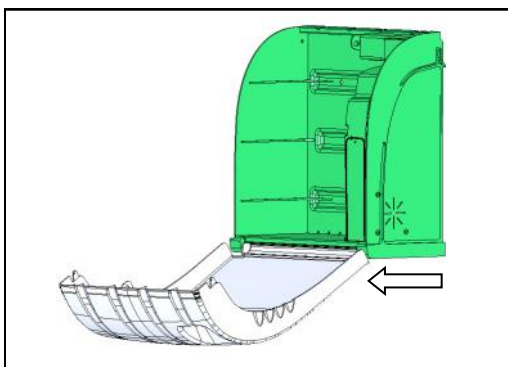


- Limflatene må være helt rene, tørre og fettfrie.

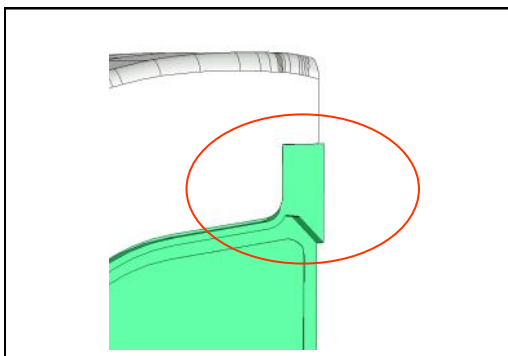


- Fjern forseglingenes beskyttende plast.

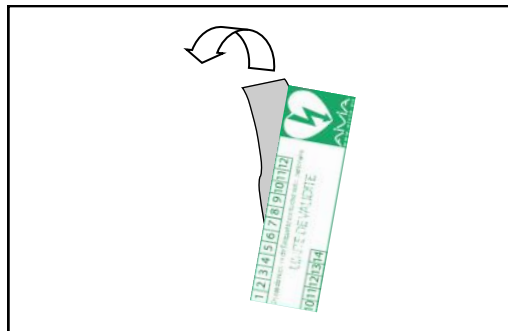

- Lim forseglingene overlappende mellom Aivias dør og kabinett.

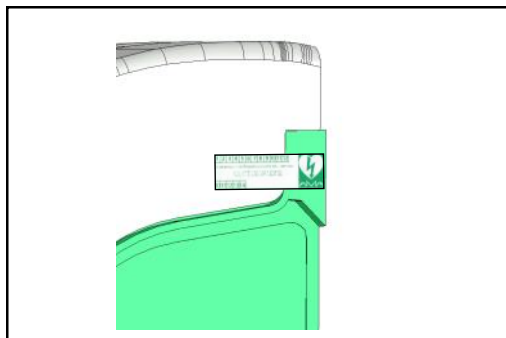

- Plasser forseglingene på begge sider av Aivia.

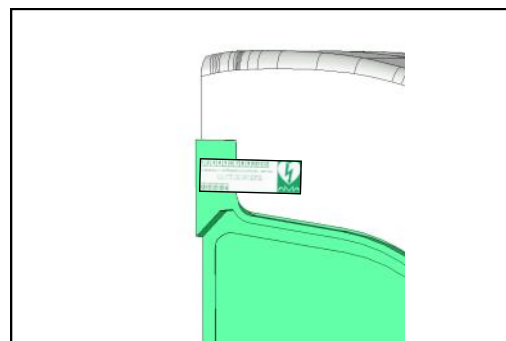

Piktogrammer

- Bildene på Aivias lokk viser hva man skal gjøre i en nødssituasjon.
- Du bør skrive ned nødnummeret som skal ringes til i tilfelle dette ikke er til stede.



Bruk

Funksjonen til nattmodus

- Aivia er utstyrt med en lysdetektor. Når lysstyrken blir utilstrekkelig, vil de hvite varsel-lampene blinke for å gjøre oppmerksom på Aivias plassering.

Funksjonen til ekstraustyret oppvarming

- Oppvarmingen gjør det mulig å holde defibrillatorens funksjonstemperatur innenfor visse grenser. Når det er veldig kaldt bør det sikres at temperaturvarsel ikke signaleres med de røde blinkende lysene.
- Ventilasjonen lar den varme luften i Aivia slippe ut. Når det er varmt bør det sikres at temperaturvarsel ikke signaleres med de røde blinkende lysene.

Funksjonen til varslar

Varsel om åpning av lokket:

- Ved åpning av lokket signaleres den visuelle alarmen med at de røde varsellampene blinker.
- Hvis deres Aivia er utstyrt med en lydalarm (Ref.: X2A200-XX100 eller X2A200-XX101) vil denne aktiveres i ca. 3 minutter.
- Lukk lokket for å slå av alarmen.

Temperaturvarsel:

- Temperaturalarmen som signaleres ved av at de røde varsellampene blinker kontinuerlig med lokket lukket, utløses ved temperaturer under 5 ° eller under 40 °.

Bruk av Aivia

Hvis du er i en situasjon som krever en defibrillator.


• Ta kontakt med redningsmannskap.

Snakk med høy og tydelig stemme, beskriv situasjonen, og ikke glem å presisere nøyaktig hvor hendelsesstedet er.



• Åpne lokket til Aivia ved å dra i det.

Den visuelle alarmen signaliseres med at de røde varsellampene blinker. Hvis deres Aivia er utstyrt med en lydalarm vil denne aktiveres i 3 minutter.

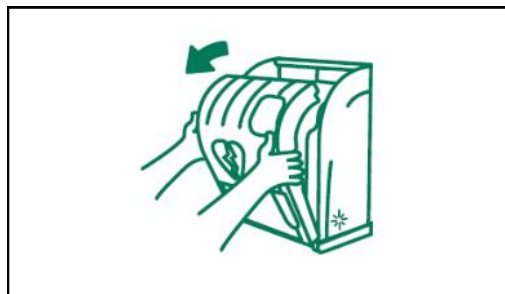

• Grip tak i defibrillatoren.



- Ta den med til den skadelidende personen.
- Start defibrillatoren.
- Følg defibrillatorens instruksjoner.

Etter bruk av defibrillatoren

- Ikke plasser defibrillatoren i Aivia uten å ha satt den tilbake i funksjonsdyktig stand.
- Følg defibrillatorens instruksjoner for å sette den tilbake i funksjonsdyktig stand.
- Deres samarbeidspartner kan hjelpe dere med å sette defibrillatoren tilbake i funksjonsdyktig stand. Ikke nøl med å kontakte samarbeidspartneren.
- Etter at defibrillatoren er satt tilbake i funksjonsdyktig stand, sett den tilbake i Aivia ved å følge instruksjonene i avsnittet "Montering av defibrillatoren".
- Sett på plass forseglingsene ved å følge instruksjonene i avsnittet "Installasjon av forseglinger".

Vedlikehold av Aivia

- Rengjør Aivias overflater med en myk og fuktig klut. Tørk Aivia med en myk, ren og tørr klut. Ikke bruk kjemiske produkter eller rengjøringsprodukter, da dette vil kunne skade Aivia.
 - Ikke gni Aivia med en hard gjenstand, da du risikerer å skrape opp eller påføre varige skader til overflatene.
 - Ikke bruk høytrykksspyler.
 - Kontroller regelmessig forseglingenenes tilstand.
 - Hvis Aivias forseglinger har blitt brutt skal dere kontrollere at alle defibrillatorens komponenter er til stede, samt at de fungerer som de skal.
- Hvis du er i tvil, ta kontakt med defibrillatorens forhandler.

Feilsøking

- De røde varsellampene blinker ikke når anordningen slås på.

1. Kontroller kablens polaritet.
2. Kontroller at strømforsyningskabelen er riktig tilkoblet.
3. Kontroller spenningen (24 V DC) på terminalen.
4. Kontroller at terminalen er riktig innsatt.
5. Ta kontakt med deres samarbeidspartner.

- De hvite varsellampene blinker ikke lenger ved nattmodus.

1. Kontroller at Aivia er koblet til strømforsyning.
2. Ta kontakt med deres samarbeidspartner.


- De røde varsellampene blinker ikke når jeg åpner lokket.

1. Kontroller at Aivia er koblet til strømforsyning.
2. Ta kontakt med deres samarbeidspartner.

- Lydalarmen aktiveres ikke når jeg åpner lokket.

1. Kontroller ekstrautstyret lydalarm (Sirene) på identifikasjonsmerket.
2. Kontroller at Aivia er koblet til strømforsyning.

Elektrisk installasjon

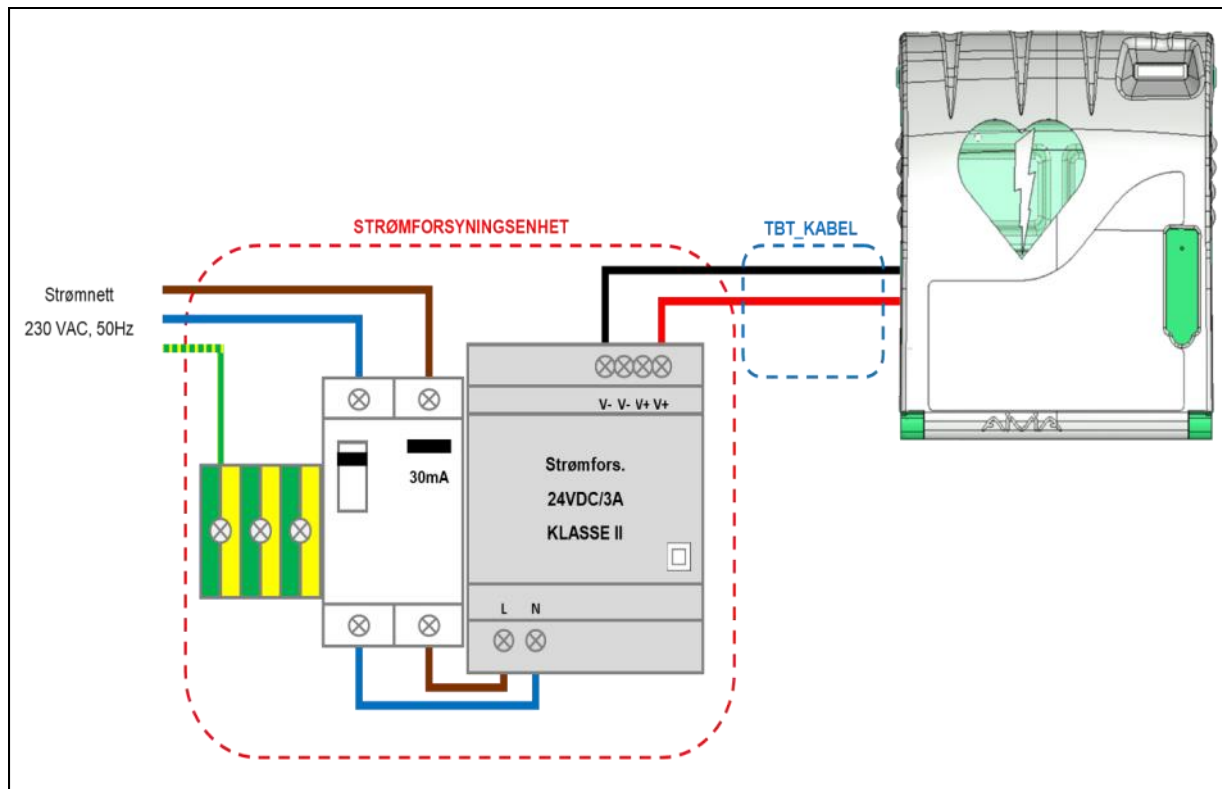

Strømforsyningsenhet

Den må være på utsiden av Aivia, den må aldri plasseres på innsiden av Aivia.

- Strømforsyningsenheten skal bestå av:
 - En strømvbryter ved overgang i jordkabel "GFCI" 10A/30mA, for å beskytte utstyret.
 - En strømforsyning* SELV eller tilsvarende 24 V DC $\pm 2\%$ /3A av CLASSE II, med begrenset strømkilde som oppfyller kravene i standarden IEC 60950-1.
 - Ledningene som kobler sammen strømvbryteren og strømforsyningsenheten må ha et tverrsnitt på 1,5 mm².
- Den primære tilkoblingen må inkludere fase, nøytral og jord.
- Det maksimale fallet i sekundærspenningen ved full belastning må ikke overstige 2 %, altså 23,5 V ved Aivias terminal.
- Innholdet i strømforsyningsenheten skal beskyttes mot støv og vann, og ventileres**.

•Kablene må holdes sammen av en krage så nært terminalen som mulig. Kabelføringen til strømforsyningsenheten være i overensstemmelse med gjeldende standarder i landet de brukes.

* Anbefalt strømforsyning: PYRESCOM C_AL/HDR100-24CA.


** Naturlig eller tvungen konveksjon i forhold til dens omgivelser og varmeegenskaper ved maksimal funksjon.

TBT-kabel:

- Type U1000R2V. 2 isolerte omsluttete ledere, tverrsnitt 1,5mm², maks. lengde 10 meter.
- Bruk den røde eller brune kabelen til +24 V.
- Bruk den sorte eller grå kabelen til 0 V.

Spesifikasjoner

Mekaniske data

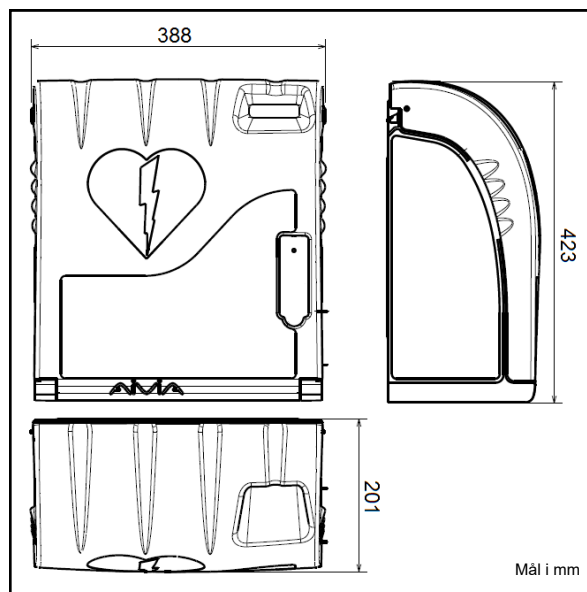

- Vekt
 - X2A200-XX000: 2,7 kg.
 - X2A200-XX100 (lydalarm som ekstrautstyr): 3 kg.
 - X2A200-XX001 (oppvarming som ekstrautstyr): 2,9 kg.
 - X2A200-XX101 (lydalarm og oppvarming som ekstrautstyr): 3,2 kg.
- Materialer:
 - Lokk: Polykarbonat.
 - Kabonett: ABS.
 - Brakett: ABS.
 - Luke: ABS.

Tekniske data

- Strømforsyning:
24 V DC $\pm$ 2 % / 3A, SELV med begrenset strømkilde som oppfyller kravene i standarden IEC 60950-1.
- Strømforbruk:
 - X2A200-XX000:
Min.: 0,9 mA.
Maks.: 80 mA.
 - X2A200-XX100 (lydalarm som ekstrautstyr):
Min.: 0,9 mA.
Maks.: 500 mA.
Lydeffekt: 103 dB / 1 meter.
 - X2A200-XX001 (oppvarming som ekstrautstyr):
Min.: 0,9 mA.
Maks.: 2000 mA.
 - X2A200-XX101 (lydalarm og oppvarming som ekstrautstyr):
Min.: 0,9 mA.
Maks.: 2400 mA.
Lydeffekt: 103 dB / 1 meter.

Temperaturer og luftfuktighet:

Min.: -20 °C.
Maks.: 55 °C.

Relativ luftfuktighet: Maks. 95 % uten kondens.

- Temperaturvarsler:
Varsel for lav temperatur: 5 °C.
Varsel for høy temperatur: 40 °C.
- Oppvarming som ekstrautstyr:
(Ref.: X2A200-XX001 eller X2A200-XX101)
Oppvarming utløses ved: 13 °C.
Vifte utløses ved: 27 °C.
- Maksimal høyde over havet: 2000 m.
- Maksimal støttet vekt: 5 kg.

Overensstemmelser

X2A200-XX*:**

EN 55022:2006
EN 55024: 1998/ A1: 2001/ A2: 2003

U2A200-XX*:**

IEC 60950-1:2005 / A1:2009
EN 61000-6-2:2005 / A1:2006
EN 61000-6-3:2007 / A1:2011

www.aivia.eu

2019-02-21



info@aivia.eu